



Manual de uso

Sitting

Índice

1. Índice
2. Componentes
3. Configuración general
4. Configuración por pieza
5. Abductor
6. Calzón pélvico
7. Pechera de sujeción y cinta trocánter
8. Cuña de tronco
9. Cuña de cabeza
10. Contacto

Componentes

Cuñas de contención

Soporte postural tanto para la cabeza como para el tronco



Abductor desmontable

Ayuda a promover la simetría y la abducción de la cadera en posición sedente.



Pechera de sujeción

Sujeción y contención de tronco y hombros.



Calzón pélvico

Contención de pelvis.



Configuración general



Configuración general

La configuración general muestra el orden recomendado de posicionamiento del Sitting. Cada pieza debe ajustarse según las características y necesidades de soporte del usuario.

1

Preparar el Sitting

Sitting listo para configurar.



2

Posicionamiento del usuario

Usuario sentado atrás y centrado.



3

Contención principal

Faja, hombros y cinta trocánter ajustadas.



4

Soportes y verificación final

Cuñas posicionadas, usuario alineado y estable.



Configure el Sitting siguiendo el orden general: prepare la base, posicione al usuario, ajuste las contenciones principales y finalice con los soportes laterales. Revise que cada pieza entregue estabilidad y comodidad, sin generar presión excesiva.

Configuración por pieza



Abductor

El abductor ayuda a promover la simetría pélvica y la abducción de cadera en posición sedente.

1

Configuración inicial



2

Posicionamiento



3

Posicionado



4

Ajuste de posición

Más cercano a la pelvis



Más hacia las rodillas



Deslice el abductor hacia adelante o hacia atrás según la talla y comodidad del usuario. Debe entregar soporte entre los muslos, sin generar presión excesiva y manteniendo una adecuada alineación pélvica.

Calzón pélvico

El calzón pélvico ayuda a estabilizar la pelvis, disminuir el deslizamiento hacia adelante y entregar mayor contención en posición sedente.

1

Configuración inicial



2

Posicionamiento



3

Posicionado



4

Verificación de ajuste

Contención pélvica correcta



El calzón pélvico debe contener la pelvis de forma firme y cómoda. Su posición puede variar según la talla del usuario, evitando el ajuste sobre el abdomen o la presión excesiva.

Pechera de sujeción y cinta trocánter

Este sistema complementa el calzón pélvico mediante la pechera de sujeción y la cinta trocánter.

1

Configuración inicial

Calzón pélvico posicionado



2

Posicionamiento

Faja



Hombros



Cierre y cinta trocánter



Con el calzón pélvico ya posicionado, ubique la primera pieza de la pechera, sitúe las sujeciones de hombros y cierre con la segunda pieza. Finalice colocando la cinta trocánter sobre los muslos, verificando un ajuste firme y estable.

Cuñas de tronco

Las cuñas de tronco ayudan a otorgar contención lateral y favorecen la alineación del tronco en posición sedente.

1

Configuración inicial



2

Posicionamiento

Acerque las cuñas al costado del tronco




3

Posicionado y ajuste

Ajuste simétrico

Ajuste diferenciado

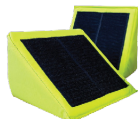

Ubique las cuñas a los costados del tronco para entregar contención lateral. Ajuste su altura y ubicación según las necesidades de soporte, procurando un contacto firme y estable, sin presionar axilas ni generar presión excesiva.

Cuñas de cabeza

Las cuñas de cabeza ayudan a entregar contención lateral y favorecen la alineación de la cabeza en posición sedente.

1

Configuración inicial



2

Posicionamiento

Acerque las cuñas a los lados de la cabeza




3

Posicionado y ajuste

Ajuste simétrico

Ajuste diferenciado

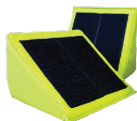

Ubique las cuñas a ambos lados de la cabeza para entregar contención lateral. Ajuste su altura y cercanía según las necesidades de soporte, sin cubrir las orejas ni generar presión excesiva.



@doifamily_chile



Doi Family



Doi Family



DOI_family